



Anti-HA Antibody (Mouse)

货号: PAM02-100

规格: 100ul

产品简介:

HA 标签是人流感血凝素的第 98-106 氨基酸序列 YPYDVPDYA, 对外源靶蛋白的空间结构影响小, 容易构建成标签蛋白融合到 蛋白 N 端或者 C 端, 因此常被用于重组蛋白的融合表达。Anti-HA Antibody 能够特异性识别 HA 标签, 用于融合蛋白的表达和定位检测。

抗体来源: 小鼠

交叉反应: HA 标签融合蛋白

克隆类型: 单克隆抗体

亚型: IgG2A

来源: 293 细胞表达的重组抗体

纯化方式: rProtein A 亲和纯化

产品纯度: > 95%, SDS-PAGE 检测

储存缓冲液: 1xPBS (pH7.4) 0.02%叠氮钠, 50%甘油

储存条件: 蓝冰运输, -20°C 可保存不少于 2 年, 避免反复冻融

产品应用:

浓度: 1mg/ml

WB=1/2000-1/20000

ELISA=1/5000-1/15000

IP=1/500-1/1000


IF=1/200

储存及运输条件:


蓝冰运输, -80°C 存储>4 年, -20°C 可保存>2 年, 避免反复冻融

数据展示：


WB 数据：

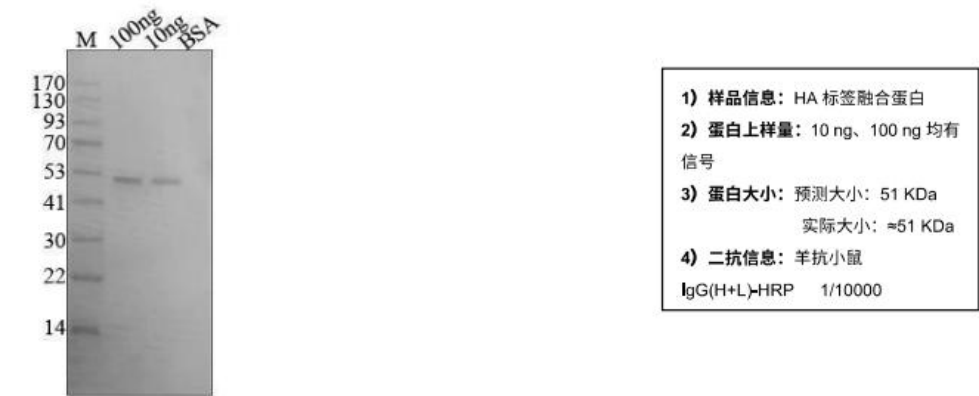

ELISA 数据：

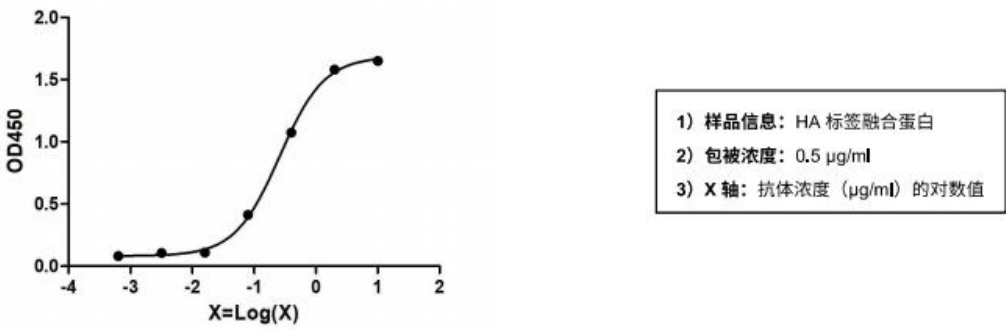

IP 数据：

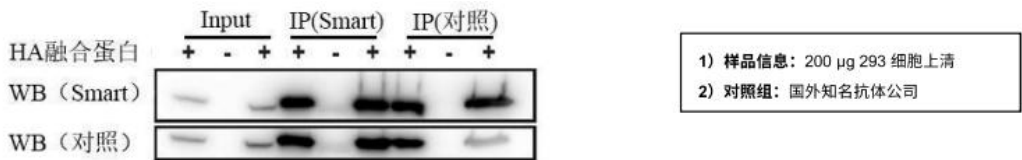

IF 数据：

